


Connectivité : Renamic NEO et App Patient



L'App Patient de BIOTRONIK

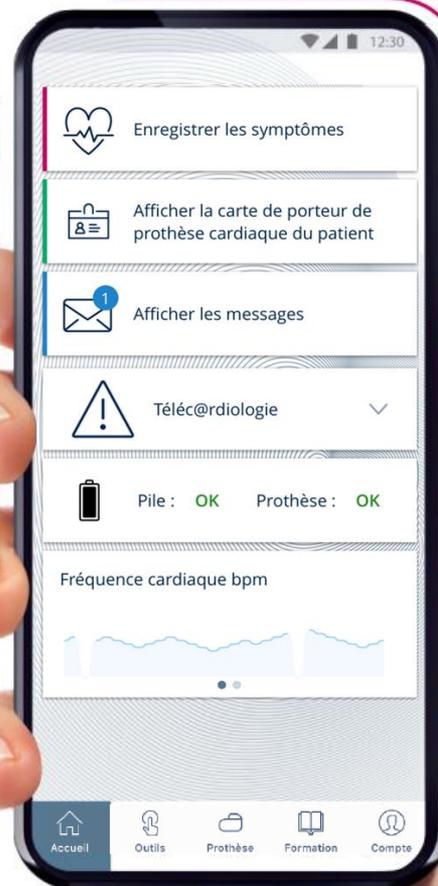

Pourquoi développer une **App Patient** ?



1

Fournir des données complémentaires à l'équipe médicale pour améliorer le traitement des patients

2

Apporter un outil aux patients qui souhaitent être plus actifs dans la gestion de leur traitement

3

Simplifier la gestion des non-transmissions par le patient grâce à des guides pratiques

App Patient disponible pour toutes les prothèses*




Journal des symptômes



Carte de porteur électronique



Demande de contact par l'équipe médicale

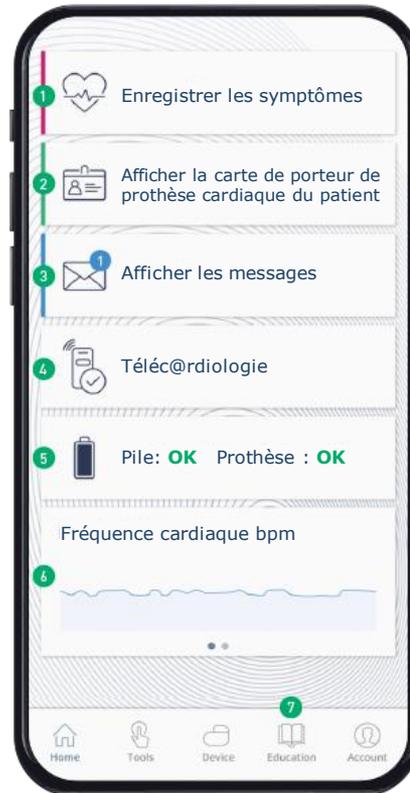

Date de la dernière transmission



Données techniques
Etat de la pile et de la prothèse



Données médicales
Fréquence cardiaque moyenne
Fréquence cardiaque au repos




Information et formation du patient :
prothèse, traitements, vie quotidienne

*A partir de l'Edora, l'Iperia, le BIOMONITOR III

Comment accéder à l'App Patient ?



Transmission du QR code via la carte de porteur

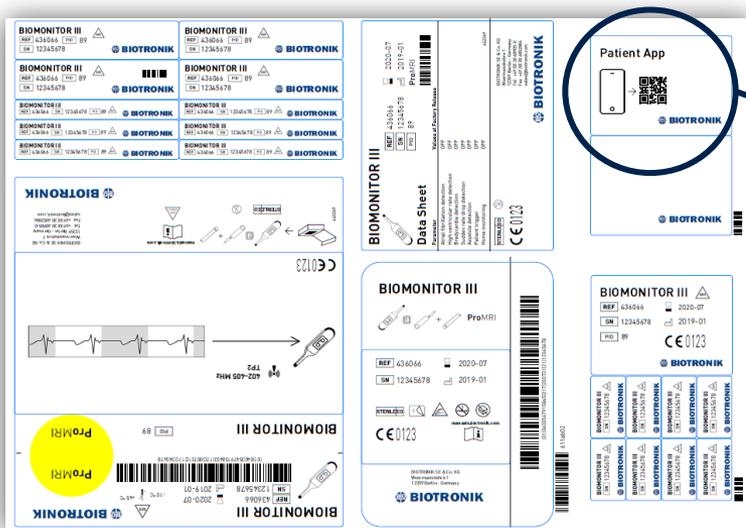


Démarrage et écran d'accueil



Le journal des symptômes



Le patient peut **annoter ses symptômes**, ils seront transmis immédiatement sur le site

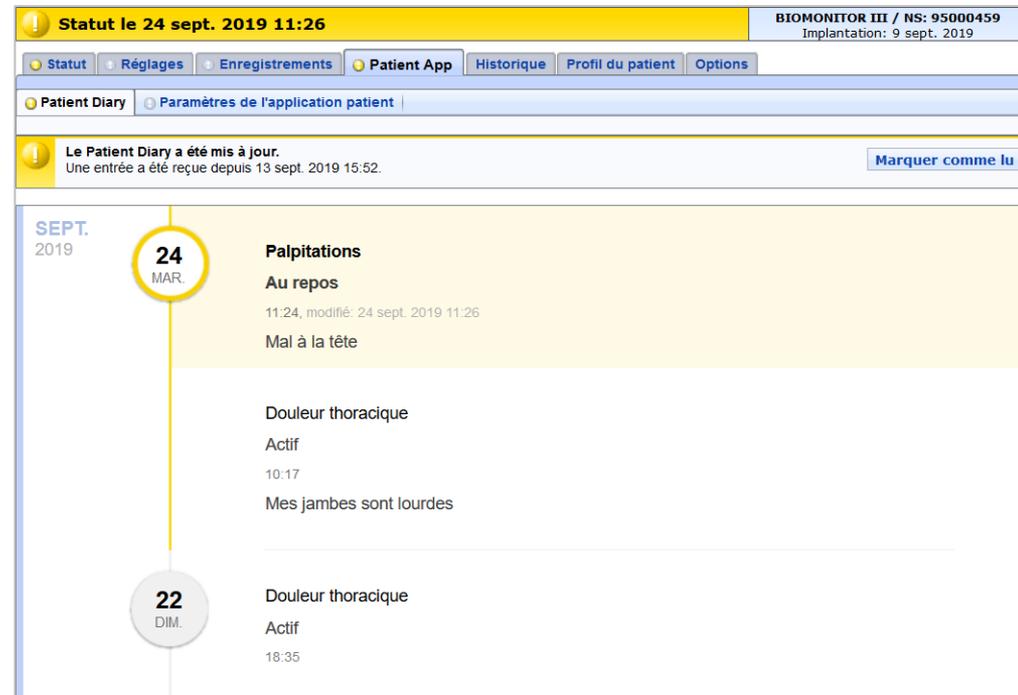

Données techniques et médicales

Le patient peut vérifier l'état de sa **prothèse** et de sa **pile** pour être rassuré sur son bon fonctionnement

La **fréquence cardiaque moyenne** et la fréquence cardiaque moyenne au repos sont aussi accessibles

Statut le 17 juin 2020 22:17		BI
Statut Réglages Enregistrements App Patient Historique Profil du patient Options		
Résumé Prothèse Détection Bradycardie Arythmie atr. Arythmie vent. Param. physiol.		
Dernier message de la prothèse créé le 22 mai 2020 15:09:12		
Fréquence cardiaque		24 h
Fréq. ventriculaire moyenne [bpm]		69
Fréq. ventriculaire moy. au repos [bpm]		62
Variabilité [ms]		52
Activité		
Activité du patient [%/jour]		2
Nombre d'enregistrements		
Enregistrements déclenchés par patient par jour		0



Si l'état de la pile ou de la prothèse n'est pas « OK » un message apparaît :

« La pile de votre prothèse à une charge faible, veuillez contacter votre médecin pour prendre RDV et prévoir de la remplacer »

« Votre prothèse ne semble pas conforme, veuillez contacter votre médecin pour prendre RDV »



Renamic Neo
The Neo Connectivity.



Connecté.



Intégré.



Fonctionnalités





Connecté.


Connectivité sans fil complète
Ethernet
USB



Interface sans fil

Plusieurs options de connectivité sans fil

- Cellulaire (4G)
- Wi-Fi
- Bluetooth

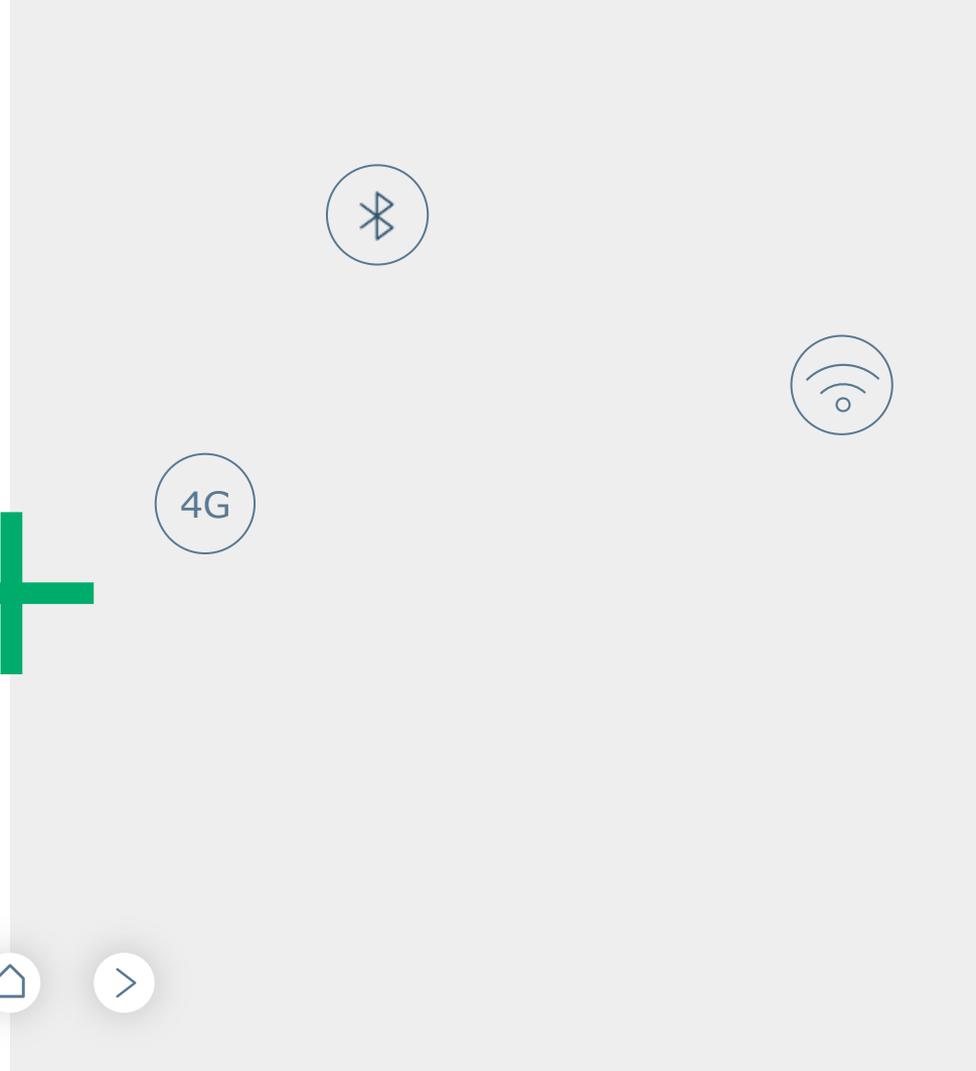

Connectivité Neo

Multiples interfaces pour l'intégration aux systèmes hospitaliers



Port mini-HDMI



Écran externe

MàJ logiciel

Données de suivi

Home Monitoring Service Center



Infrastructure du centre



Données de suivi

Dossier Médical Partagé



Données de suivi

Imprimantes



1:1 WLAN¹



Bluetooth



USB



WLAN



Ethernet



4G/3G



Cliquer ici



Intégré.

ReportShare et export EHR
disponibles.
Moins de papier.
Consultation à distance.




Export ReportShare et DMP



ReportShare



BIOTRONIK Home Monitoring Service Center



Partage des comptes-rendus d'interrogation des prothèses via un réseau sécurisé

HMSC website




Praticiens

Export DMP



Directement depuis le programmeur vers un PC

- Bloc
- Secrétariat
- Bureau des ARCs
- ...



Dossier Médical Partagé






Fonctionnalités

Design intelligent.
Fonctions étendues.
LiveView et LiveControl



LiveView & LiveControl

Support à distance en temps réel

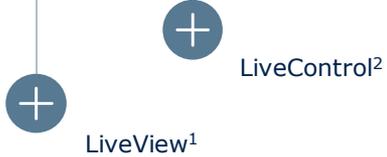

LiveView & LiveControl

Support à distance en temps réel



BIOTRONIK

Version : NEO 2201.A/1

4G

Bluetooth

Wi-Fi

LiveControl

USB

Renamic Neo 98%

11:25
17/03/2022

1 Veuillez téléphoner à BIOTRONIK

Veuillez téléphoner à votre interlocuteur BIOTRONIK avant de commencer une session de LiveSupport.

Interlocuteur BIOTRONIK
Hotline BIOTRONIK +33 14 675 9660

2 Commencer session de LiveSupport

Terminer LiveSupport

LiveView LiveControl

Programmeur NEO-80001544
Mot de passe 568 501 434

Adresse e-mail de l'utilisateur distant nawel.boudraa@biotronik.com

Terminer

Suivi

Paramètres

Tests

Enregistrements

Diagnostic

Statut

LiveSupport

Autres

Préférences

Fin

Spécial Aide Liste prothèses Gestionnaire données





Renamic Neo
The Neo Connectivity.



Connecté.



Integré.



Fonctionnalités



Contact

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin · Germany
www.biotronik.com



200096/B/2110

CE0123

© BIOTRONIK SE & Co. KG.
All rights reserved. Specifications are subject to modification, revision and improvement.

